

MASSZÁZSPISZTOLY

S3



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás



1. Erőteljes, nagy nyomatékú masszázskészülék.
2. Újratölthető lítium akkumulátor (2+ óra használat cseréenként)
3. Sebesség beállítása az optimális nyomás eléréséhez
4. Könnyű, vezeték nélküli eszköz (töltőadaptert tartalmaz)
5. Be/Ki gomb
6. 6x masszázsfaj

Masszázs fej



Műszaki adatok

Súly: 1,1 kg

Töltés: 110-240 V 50/60 Hz - 5 A -26 VDC-1 A

Töltés

Az első használat előtt töltsse fel a készüléket. A töltési idő kb. 6 óra. A töltéshez használja a mellékelt 24 V DC adaptert. Helyezze a töltőkábelt a csatlakozóba, a töltőadaptert pedig az áramforrásba.

Töltés közben a LED-es akkumulátorjelző pulzálva jelzi az akkumulátor állapotát.

Abban a pillanatban, amikor a LED megszűnik pulzálni, a készülék teljesen feltöltődött.

Nem ajánlott a készüléket teljesen lemeríteni (piros LED).


Egyetlen feltöltéssel a készülék a kiválasztott forgási sebességtől és nyomástól függően 2+ órán át működik.

Vezérlők

Kapcsolja be a készüléket a készülék alján található be-/kikapcsoló gombbal. Kapcsolja ki a készüléket ismét a készülék alján található be-/kikapcsoló gombbal.

Helyezze be a kívánt masszázsféjet az elülső részbe. Nyomja be a fejet a lyukba. Használat után vegye ki a fejet ismét erővel.

A készülék bekapcsolása (a készülék alján lévő gomb) és a fej csatlakoztatása után. Ezután nyomja meg a készülék kijelzőjén lévő be/ki gombot. Ezután nyomja meg a + vagy a - gombot a kívánt sebesség beállításához. A sebesség értéke a kijelző bal oldalán jelenik meg. Az akkumulátor töltöttségi szintje a kijelző jobb oldalán jelenik meg.

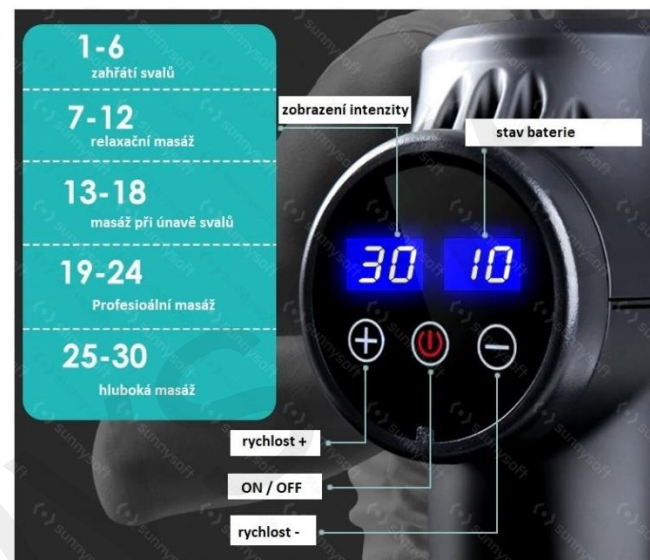

Karbantartás

Használjon nedves ruhát, és törölje le a készüléket. Ezután használjon száraz ruhát, és törölje szárazra a készüléket.

Tárolás vagy utazás előtt helyezze a készüléket egy utazódobozba.

Értesítés

Ne tegye a készüléket vízbe. Védje a készüléket a víztől és más folyadékoktól. Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.

Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

Ne használja a készüléket 1 óránál tovább. 30 percig hagyja a készüléket lehűlni.

Ne használja a készüléket töltés közben.

A létesítmény csak felnőttek számára van fenntartva. A készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől. A készülék használatáról konzultáljon orvosával.

Figyelmeztetés

Használja a készüléket az alábbi utasítások szerint. Ellenkező esetben fennáll az áramütés, sérülés vagy tűzveszély.

A készüléket kizárólag felnőtteknek szánják.

A készüléket csak száraz bőrön, ruházat felett használja. Finoman nyomja meg. Mozgassa a készüléket a kiválasztott területen 60 másodpercig.

A készüléket csak lágy szövetek/izmok felett vezesse át. Ha a készülék kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, ne masszírozza a területet. Ne használja a készüléket a fej vagy a csontok masszírozására.

Csak a mellékelt masszázsfejeket használja.

Az eszköz nem okoz fájdalmat vagy véraláfutást. Ha véraláfutások jelennek meg, hagyja abba a készülék használatát. Ne helyezzen ujjakat, haját vagy más tárgyakat a fej és a készülék közötti térbe.

Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőnyílásokba, és ne takarja le azokat semmivel.

Védje a berendezést a víztől és más folyadékoktól.

A készüléket csak a mellékelt adapterrel töltsé.

Használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ha használat közben megsérül vagy rendellenességeket mutat, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Ne dobja a készüléket a földre, és ne kezelje azt bármilyen nem megfelelő módon.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket töltés közben.

Használat előtt konzultáljon a készülékről kezelőorvosával.

Terhes nők, cukorbetegség, neuropátiában vagy retinasérülésben szenvedők, törések, műtét utáni állapotok, epilepszia vagy migrén, ízületi csere, porckorongsérülések, mozgáskorlátozottság, illetve bármilyen implantátum vagy szívbetegség (szívritmus-szabályozó) nem használhatják a készüléket. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz