

Inskam H100, mitesszer eltávolító



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

ÉRTESÍTÉS

1. Használat előtt ne felejtse el forró borogatást feltenni az arcára arcgőzölővel vagy forró törülközővel, hogy a pórusok kinyíljanak, a mitesszerek és az olaj felpuhuljanak, ekkor a mitesszerek könnyen kiszívhatók.
2. Érzékeny bőrű felhasználók első alkalommal válasszon alacsonyabb szintet, majd fokozatosan növelje a szintet a bőr állapotának megfelelően.
3. A bőrsérülés elkerülése érdekében ne nyomja a termék rögzítését az arcbőrre.
4. Ne hagyja a helyén túl sokáig, lehetőleg legfeljebb 2 másodpercig, különben bőrelszíneződést vagy sérülést okozhat.
5. Használata heti 1-2 alkalommal javasolt, alkalmanként legfeljebb 5 perc, ismételt és tartós használatra nem alkalmas.
6. Az eltávolító használata után enyhe irritáció vagy bőrpír jelentkezhet a bőrön, ez normális, és 30 percen belül elmúlik. Magától elmúlik, kérjük, vigyázzon a bőrére.
7. Terhes nők, gyermekek, bőrbetegségben szenvedők és arcpasztikai műtét utáni betegek alkalmazása nem javasolt.


TERMÉKBEVEZETÉS

- A mitesszer eltávolító egy új típusú arctisztító, ápoló és szépségápoló készülék, amely egyesíti a pórustisztítást, zsírtalanítást, mitesszer eltávolítást stb. funkcióit.

- A termék non-invazív technológiájával és vákuum-abszorpciós funkciójával kombinálva ez a termék különféle specifikációjú, bőrbarát hegyet használ. Felszívja a pórusokban lévő szennyeződések, mitesszerek, így javítja a bőr hámrétegét és a pórusok ismét simává, zárttá válnak.

- Ez a termék mobiltelefonhoz és számítógéphez csatlakoztatható, az arcbőr állapota pedig egyértelműen és intuitív módon megérthető a mobiltelefonos APP-on vagy számítógépes szoftveren keresztül.

TERMÉKdiagram

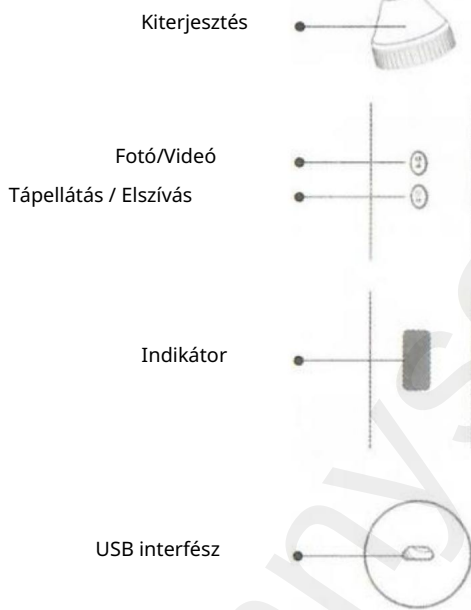


UTASÍTÁS

Mobil felhasználók Olvassa be a QR-kódot, és töltsse le az alkalmazást.



2. Távolítsa el a terméket, válassza ki a megfelelő tartozékot, és szerelje fel a termék tetejére.

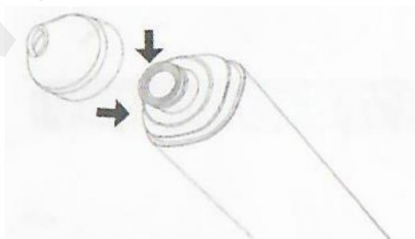

Különböző bőrtípusokra alkalmas



Kis kerek rögzítés
érzékeny területekre



Kis ovális rögzítés
Az eltávolításhoz
fekete pontok a barázdákban
orr



Nagy ovális rögzítés
Nagy szívócsatlakozó,
amely alkalmas a T-
zóna mitesszereire



Mikrokristályos
kiterjesztés
Alkalmas gyengéd
hámlasztásra és az elhalt
bőr eltávolítására



Közepes kerek
kiterjesztés
Alkalmas olyan területekre,
ahol nagyobb az előfordulásuk




Nagy kerek rögzítés
Alkalmas a T-zónában
lévő mitesszerekre

mitesszerek/akné/olajosodás

3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a termék elindításához, a termék LED-je kigyullad, nyissa meg a „Cleanski” alkalmazást, és kattintson rá a WiFi „Cleanski-XXXX” csatlakoztatásához.



4. A Wi-Fi-hez való csatlakozás után térjen vissza a „Cleanski” alkalmazáshoz, irányítsa a lencsét az arcára, és ellenőrizze, hogy látja-e az arcpórusok állapotát a telefonján. Amikor megjelenik a következő üzenet: "A Cleanski-xxxx nem érhető el online, így a WLAN-asszisztens jobb hálózatra válthat?", kattintson a "nem engedélyezett" gombra.
5. Bekapcsolt állapotban a bekapcsoló/kipufogó kapcsoló gomb rövid megnyomásával állíthatja be a termék szívását igényei szerint. A termék 3 folyamatos sebességre van beállítva (szelíd üzemmód, normál mód, erős üzemmód).

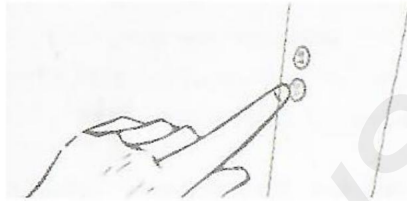

6. Lassan mozgassa a hegyét a bőrön, és ne tartsa az egyik területen 2 másodpercnél tovább.



7. Használat után tisztítsa meg a terméket, és tartsa szárazon és tisztán a további használathoz.

TÖLTÉS

Ha alacsony a teljesítmény, a piros fény villog; A töltéshez a megadott 5V/1A feszültségű hálózati adaptert kell használni.

Amikor az akkumulátor töltődik, a jelzőfény pirosan világít.

Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény zöldre vált (2 óra töltés).

PARAMÉTEREK

Név	Intelligens vizuális mitesszer eltávolító
Bővítés	20x
Akkumulátor paraméterei	800 mAh
Töltési idő	2 óra
Az akkumulátor élettartama	1,5 óra
Méret	197 × 40 × 40 mm
Rendszertámogatás	Android 4.4, iOS 9.0, Windows Vista/7/8/10, MacOS X 10.8 és újabb
Elemek listája	Smart Visual mitesszer eltávolító 1x Hosszabbítás 6x USB adatkábel 1x Termék kézikönyv 1x

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz