

Váll- és nyakmasszírozó

Modell: RF-SNM060



VIGYÁZAT

- Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket csak a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel szabad használni.
- A készüléket csak a készüléken jelölt biztonsági feszültségen szabad táplálni.
- **AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDÉLT. BELÜL NINCSENEK JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK.**
- **A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.**



Az egyenlő oldalú háromszögben található nyílhegyű villám szimbólum a felhasználó figyelmeztetésére szolgál a készülék burkolatában lévő szigeteletlen „veszélyes feszültség” jelenlétére, amely

olyan nagyságrendű, hogy áramütés veszélyét okozza.



Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel a felhasználó figyelmét felhívja a fontos működési és információra.

karbantartási (szervizelési) utasításokat a készülékhez mellékelt dokumentációban.

FONTOS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ez a termék egy polarizált csatlakozódugó (az egyik pólus szélesebb, mint a másik). Biztonsági okokból

Ez a csatlakozódugó csak a megfelelő módon illeszkedik polarizált aljzatba. Ha a csatlakozódugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg. Ha továbbra sem illeszkedik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz egy megfelelő aljzat telepítéséhez. **NE** kerülje meg ezt a biztonsági funkciót semmilyen módon.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni, be kell tartani és követni kell az összes biztonsági és kezelési utasítást. Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

VESZÉLY

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Használat után, valamint tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. **NE** vízbe esett készülék után nyúljon. Azonnal húzza ki a konnektorból.
3. **NE** Használja a masszírozót fürdés vagy zuhanyozás közben.
4. **NE** Helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az leeshet, vagy a kádba vagy a mosogatóba húzódhat.
5. **NE** helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba.
6. Soha ne használjon tűket vagy más fém rögzítőket ehhez a készülékhez.
7. Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg a burkolatot. Dobja ki a készüléket, ha a burkolat bármilyen romlás jeleit mutatja, például hólyagosodást vagy repedést.
8. **NE** ne használja nedves vagy párás környezetben. Tartsa a masszírozót szárazon.

FIGYELMEZTETÉS

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

1. A készüléket bekapcsolt állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül.
2. **NE** használja takaró vagy párna alatt. Túlmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
3. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, rokkant vagy fogyatékkal élő személyek használják, vagy ha a készüléket azok közelében használják.
4. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően használja, a jelen kézikönyvben leírtak szerint. **NE** használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
5. Soha ne használja a készüléket a következő körülmények között: a masszírozó vezetéke vagy csatlakozója sérült; a masszírozó megsérült vagy erős terhelés érte.

leesett; a masszírozó vízbe esett. NE próbálja meg saját kezűleg megjavítani. Vigye vissza a készüléket egy szervizközpontba vizsgálat és javítás céljából.

6. **NEA** készüléket a tápkábelénél fogva hordozza, vagy használja a kábelt fogantyúként.
7. NE törje össze a készüléket tárolás közben.
8. Tartsa távol a vezetéket a forró felületektől.
9. Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
10. NE használja a gépet olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
11. NE üzemeltesse robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzök jelenlétében.
12. A leválasztáshoz állítsa az összes vezérlőt kikapcsolt állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
13. NE terhelje túl a konnektort. Kizárólag a jelzett áramforrást használja.
14. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében NE szerelje szét és NE próbálja meg javítani a készüléket. A szakszerűtlen javítás áramütést vagy sérüléseket okozhat a készülék használata közben.
15. Soha ne a kábelt húzva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
16. Használat előtt konzultáljon orvosával, ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll Önnél: trombus, aneurizma, vénatágulat, gerincferdülés, szívbetegség, magas vérnyomás.
17. NE használja egyidejűleg műszívvel, EKG-szkennerrel vagy elektronikus orvostechnikai berendezéssel.
18. A készülék fűtött felülettel rendelkezik. A hőre érzéketlen személyeknek óvatosnak kell lenniük a készülék használata során.
19. Hagyja abba a használatát, ha rosszul érzi magát.



A készülék **NEM** kereskedelmi vagy orvosi célra nem használható. Egészségügyi aggályok esetén a Shiatsu nyak- és hátmasszírozó használata előtt konzultáljon orvosával.



CSAK beltérben használjuk!



NE Nedves helyiségekben használja a készüléket (pl. fürdés vagy előadás közben)




■ **NE** mosás!

■ **NE** vegytisztítás!


■ Miután 20 percig használta a készüléket, hagyja 30 percig hűlni, mielőtt újra használná.

TERMÉKÁTTEKINTÉS

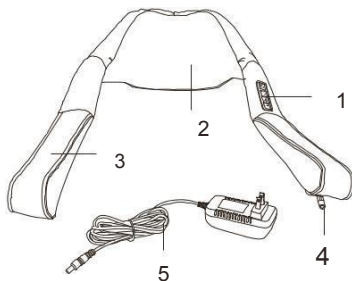

1. Vezérlőpult
Shiatsu
2. csomópontok
Pozicionáló
3. fogantyúk
Egyenáramú
4. tápcsatlakozó
5. Hálózati adapter

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

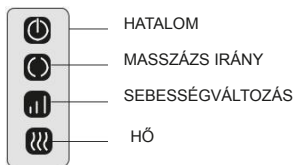

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az egyenáramú tápcsatlakozóba, majd dugja be a hálózati adaptert egy elektromos aljzatba.
2. Fogja meg a pozicionáló fogantyúkat, és helyezze a fő egységet a nyaka köré úgy, hogy a shiatsu csomópontok a háta közepén legyenek.
3. Nyomja meg a „” A BE/KI gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket.
4. Nyomja meg a „” A masszázs irányának megváltoztatásához nyomja meg a MASSZÁZS IRÁNY gombot.
5. A fűtés bekapcsolásához nyomja meg a „” HEAT gombot; a kikapcsoláshoz nyomja meg ismét.

6. A pozicionáló fogantyúk segítségével helyezd át a shiatsu csomókat a nyak és a hát más területeire.
7. Nyomja meg a „” „A készülék kikapcsolásához bármikor nyomja meg a KI/BE gombot.
8. A készülék 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

JEGYZET:A hőfunkció egyidejű használata 15 percnél tovább tilos **NEM**ajánlott. Hagyja a masszírozót lehűlni a fűtési ciklusok között.

MASSZÁZSTERÜLETEK



TERMÉKKARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Használaton kívül helyezze a masszírozót biztonságos, hűvös és száraz helyre.
2. A kihúzás után törölje át puha, nedves ruhával, nem súrolószeres tisztítószerekkel.
3. Soha ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.
4. Tartsa távol minden oldószertől és erős mosószertől.
5. **NE** próbálja meg megjavítani ezt a masszírozót. Nincsenek benne felhasználó által javítható alkatrészek.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A masszírozó nem kapcsol be	A hálózati adapter csatlakozója laza	Csatlakoztassa újra a csatlakozódugót a konnektorba
	Ki van kapcsolva az áram	Nyomja meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz a masszírozón
	Nincs áram	Próbáljon ki egy másik konnektort
Automatikusan kikapcsol	A 15 perces időzítő	A masszírozó időzítővel és 15 után magától kikapcsol perc. Megnyomhatja a bekapcsológomb egy másik elindításához 15 perces masszázs
	A masszírozó túlmelegszik védelmi funkció bekapcsol a masszírozó automatikusan kikapcsol amikor túl meleg	Várja meg, amíg a masszírozó bekapcsolás előtt hűlni kezd vissza ra

1. Az áthúzott szemeteskuka szimbólumának jelentése

Az áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

2. Régi készülékek visszavételének lehetőségei

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelvnek, a 2014/35/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek, a rádióberendezésekre vonatkozó 2017. évi rendeletnek, a bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló 2012. évi rendeletnek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu