

RENPHO

Felhasználói

Lábmasszírozó Kompakt



RP-FM058R



FeketeFehér

FONTOS UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. FIGYELMEZTETÉS – Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.
 - a) A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a hálózathoz. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha nem használja, valamint mielőtt alkatrészeket szerelne fel vagy levenne.
 - b) Ne használja takaró vagy párna alatt. Túlmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
 - c) Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, rokkant vagy fogyatékkal élő személyek használják, vagy ha azokat gyermekek, fogyatékkal élők vagy személyek közelében használják.
 - d) A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően, a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
 - e) Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozódugója, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy vízbe esett.
 - f) Ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
 - g) Tartsa távol a vezetéket a forró felületektől.
 - h) Soha ne üzemeltesse a készüléket elzárt szellőzőnyílásokkal. Tartsa a szellőzőnyílásokat szöszöktől, hajtól és hasonlóktól mentesen.
 - i) Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
 - j) Ne használja kültéren.
 - k) Ne használja olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
 - l) A leválasztáshoz kapcsolja ki az összes vezérlőt, majd húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
4. A készüléket csak a készülékhez mellékelt hálózati adapterrel szabad használni.
5. A készüléket csak a készüléken jelölt biztonsági feszültségen szabad táplálni.
6. A készülék fűtött felülettel rendelkezik. A hőre érzéketlen személyeknek óvatosságra kell lenniük a készülék használata során.
7. FIGYELMEZTETÉS: A forró felületeket óvatosan használja. Súlyos égési sérüléseket okozhat. Ne használja érzéketlen bőrfelületen vagy rossz vérkeringés esetén. A hő felügyelet nélküli használata gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek által veszélyes lehet.
8. FIGYELMEZTETÉS: Ne álljon a készülékre vagy benne. Csak ülve használja.
9. A készülék kizárólag háztartási használatra készült, nem orvosi célra. Nem szabad betegségek vagy rendellenes fizikai állapotok kezelésére vagy enyhítésére használni.

Az akkumulátorról



1. A használt elemeket azonnal távolítsa el és hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa gyermekektől elzárva.
 2. NE dobja az elemeket a háztartási hulladékba és NE égesse el azokat.
 3. Még a használt elemek is súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
 4. A kezeléssel kapcsolatos információkért hívja a helyi mérgezés-ellenőrző központot.
-
5. Az akkumulátor behelyezése előtt tisztítsa meg az akkumulátor és a berendezés érintkezőit is.
 6. A nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
 7. Ne erőltesse a kisütést, az újratöltést, a szétszerelést, a gyártó által megadott hőmérsékleti besorolás fölé hevítést és az elégetést. Ez sérülést okozhat a szivárgás, a szivárgás vagy a robbanás miatt, ami kémiai égési sérüléseket okozhat.
 8. Győződjön meg arról, hogy az elemek a polaritásnak (+ és -) megfelelően vannak behelyezve.
 9. Ne keverjen régi és új elemeket, különböző márkájú vagy típusú elemeket, például alkáli, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
 10. A hosszabb ideig nem használt berendezésekből az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el, és azonnal hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa.
 11. Mindig teljesen zárja le az elemtartó rekeszt. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, vegye ki az elemeket, és tartsa azokat gyermekektől elzárva.
 12. Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
 13. Mindig a megfelelő méretű és típusú akkumulátort válassza, amely a legmegfelelőbb a tervezett felhasználáshoz.
A berendezéshez mellékelte, a helyes akkumulátor kiválasztását segítő információkat referenciaként meg kell őrizni.
 14. Elem vagy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A lítium gomelemek vagy elemek lenyelése kémiai égési sérüléseket, lágy szövetek perforációját okozhatja, súlyos esetekben pedig halált is. Lenyelés esetén azonnal el kell távolítani őket.
 15. Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék ki az elemeket.
 16. Ne erőltesse az elemek kisütését. Ne deformálja az elemeket. Ne dobja tűzbe az elemeket.
 17. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani a berendezésből, és megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha a lemerült elemeket hosszú ideig a berendezésben tartják, elektrolitszivárgás léphet fel, ami a berendezés károsodását és/vagy személyi sérülést okozhat.
 18. A sérült tartójú lítium akkumulátort nem szabad víznek kitenni.
 19. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban, fémtárgyaktól távol tárolja. Ha már kicsomagolta őket, ne keverje össze és ne keverje össze az elemeket.
 20. Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
 21. Ügyeljen arra, hogy az elemes készülék vagy az elem pólusai fémtárgyak miatt rövidzárlatot okozhatnak.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A RENPHO kompakt lábmasszírozóról

1. A doboz tartalma

- 1 x Kompakt lábmasszírozó
- 1 db távirányító
- 1 db adapter

2. Specifikációk

Termék neve: Lábmasszírozó

Modell: RP-FM058R

Bemenet: 12V --- 2,5 A

Névleges teljesítmény: 30W

Automatikus kikapcsolás időzítő:
15/20/25/30 perc

Fűtési terület: Alul

Anyag: ABS + Lycra szövet

Fűtési hőmérséklet: 50 alatt°C/122°F

Termék súlya: 3,4 kg / 7,5 font

3. Termékáttekintés

Levehető lábvédő cipzárral

Érintőpanel

Távirányító

Hatalom


(Automatikus kikapcsolás)

Levegő
intenzitása

Gyúrás intenzitása

Hő

4. Funkció

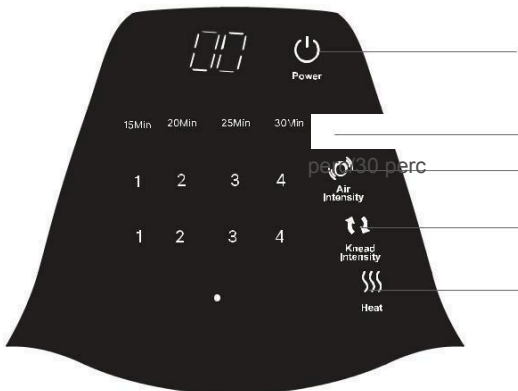

Be-/kikapcsolás

15 perc (alapértelmezett)/20 perc/25

perc/30 perc

1 (Alapértelmezett)/2/3/4/KI

1 (Alapértelmezett)/2/3/4/KI

BE (Alapértelmezett)/KI

A RENPHO kompakt lábmasszírozó használata

Javasoljuk, hogy a masszázst legfeljebb 30 percig élvezze. A hosszabb masszázsidő enyhe fájdalmat okozhat.

Csatlakoztassa a csatlakozódugót a tápforráshoz. A bekapcsológomb zölden villog, sípoló hang hallatszik, és a masszírozó készenléti üzemmódba lép. Használat előtt távolítsa el a védőfóliát az érintőpanelről.

1. Nyomja meg a bekapcsológombot a masszírozó bekapcsolásához (a bekapcsológomb zölden, míg a többi gomb fehéren világít). Ellenőrizze az alapértelmezett időt és intenzitást a fenti Funkció részben.
Nyomja meg újra a gombot a készenléti üzemmódba lépéshez (csak a bekapcsológomb villog zölden).
2. Az Idő gomb megnyomásával válthat az automatikus kikapcsolási idő 15, 20, 25 vagy 30 perc között. Az időzítő minden alkalommal visszaáll az időzítő értékre, amikor megnyomja az Idő gombot.
3. Nyomja meg a Légáramlás intenzitása gombot a légáramlás intenzitásának 1/2/3/4/KI beállításához.
4. Nyomja meg a Dagasztás intenzitása gombot a dagasztás intenzitásának 1/2/3/4/KI beállításához.
5. A fűtési funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg a Fűtés gombot.

Jegyzet:

1. A légnyomás és a dagasztás funkció egymástól függetlenül is működhet. A fűtés funkció csak akkor működik, ha a légnyomás vagy a dagasztás funkció be van kapcsolva.
2. Minden megnyomást sípoló hang és a megfelelő jelzőfény kíséri (kikapcsolt állapotban a LED kialszik).
3. Ha a fűtés, a légnyomás és a dagasztás funkciók egyike sem működik, és az Idő és Ha a bekapcsológomb jelzőfényei világítanak, a masszírozó készenléti üzemmódba lép, ha 10 másodpercen belül nem történik további művelet.
4. A masszírozó memória funkcióval van programozva. A bekapcsológomb ismételt bekapcsolásakor a legutóbb beállított ütemterv szerint fog működni. A memória funkció nem működik, ha a masszírozó kikapcsolása előtt csak az időzítő funkció működik, vagy ha kikapcsolja az áramellátást.
5. A masszírozó 12-es amerikai férfi méretig (46-os EU férfi méretig) illik.
6. Levehető lábvédő: a cipzár lehúzásával eltávolítható és tisztítható.



Termékápolás és karbantartás

1. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni. A tisztításhoz puha, semleges mosószerrel megnedvesített pamutkendőt használhat.
2. Nem névleges feszültség (DC 12V, 2,5A) használata tilos.
3. Nem szakember számára tilos a készülék javítása vagy alkatrészeinek cseréje.
4. Ha a hálózati adapter sérült, azt a gyártó által jóváhagyott szervizrészlegnek vagy szakképzett személyzetnek kell kicserélnie a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
5. Ne használja és ne tárolja a készüléket nedves környezetben vagy magas hőmérsékleten.
6. A sérülések elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyakat a készülék kezeléséhez.

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
A masszírozó nem működik.	1. Lepakcsolt tápellátás vagy laza csatlakozódugó, ami rossz érintkezés. 2. A bekapcsológomb ki van kapcsolva, vagy az időzítő lejárt visszaállították. 3. Az autómotor leállások a következők miatt a készülék is be van kapcsolva hosszú aktiválás túlelegetés elleni védelem.	1. Csatlakoztassa újra a tápegységet. 2. Kapcsolja be a bekapcsológombot. 3. A masszírozót a motor után használja természetes módon lehűl.
A masszázs az intenzitás túl magas vagy túl alacsony.	1. A lábad elhelyezve a rossz szög. 2. Nem választottam intenzitási szint, amely neked való.	1. Állítsa be az érintkezési szöveget a kívánt mérsékelt intenzitású. 2. A masszírozó 4 intenzitási szinttel rendelkezik, Válassza ki a kívánt intenzitást. Mi Kezdetben alacsony intenzitást javaslok. Vagy válassza ki az egyesével a légnyomást, ill. dagasztó funkció az intenzitás csökkentése érdekében.
Nincs fűtés, ill. elégtelen fűtés.	1. A fűtési funkció ki van kapcsolva. 2. A termék szerkezet és működés az elv korlátozza a sebességet az alja felmelegedhet fel. Ezért a a felmelegedés úgy tűnhet kicsit lassú, 7-10 perccel azelőtt, hogy megtehetné érezni a nyilvánvaló hőséget.	1. Kapcsolja be a fűtés gombot. 2. Körülbelül 7-10 perc alatt teljesen felmelegszik felmelegszik. Kérjük, legyen türelmes, mert ez a kerülje a hőmérséklet túl gyors emelkedését.
Az érintőpanel nem működik megfelelően.	1. A műanyag fólia a az érintőpanel nem eltávolítva. 2. Nedvesek az ujjak. 3. Nem elegendő az érintési felület.	1. Használat előtt távolítsa el a műanyag fóliát. 2. Szárítsa meg az ujjait, mielőtt megérinti a gomb. 3. A hüvelykujjával nyomja meg a gombokat a jobb érintésérzékenységet érhet el.

1. Az áthúzott szemeteskuka szimbólumának jelentése

Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

2. Régi készülékek visszavételének lehetőségei

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.

1. Az elemeken vagy akkumulátorokon található áthúzott szemeteskuka szimbóluma azt jelzi, hogy azokat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
hulladékként jelennek meg az életük végén.
2. Jogi kötelezettsége van a régi elemek és akkumulátorok használat utáni visszavételére. Ezt ingyenesen megteheti egy kiskereskedelmi üzletben vagy más, az Önhöz közeli gyűjtőhelyen. A megfelelő gyűjtőhelyek címét a vásárlótól vagy a helyi önkormányzattól kérheti el.
3. Az elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak a környezetre és az emberi egészségre. A régi elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülését célozza.
4. Kérjük, amennyire csak lehetséges, kerülje a régi elemekből származó hulladék keletkezését, pl. Kérjük, kerülje a közterületek szemetelését azáltal, hogy nem hagyja gondatlanul az elemeket vagy az elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelvnek, a 2014/35/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek, a 2016. évi elektromos berendezésekre (biztonság) vonatkozó rendeletnek, a 2016. évi elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó rendeletnek, a 2012. évi egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló rendeletnek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>