


Wi-Fi digitális mikroszkóp

Inskam303

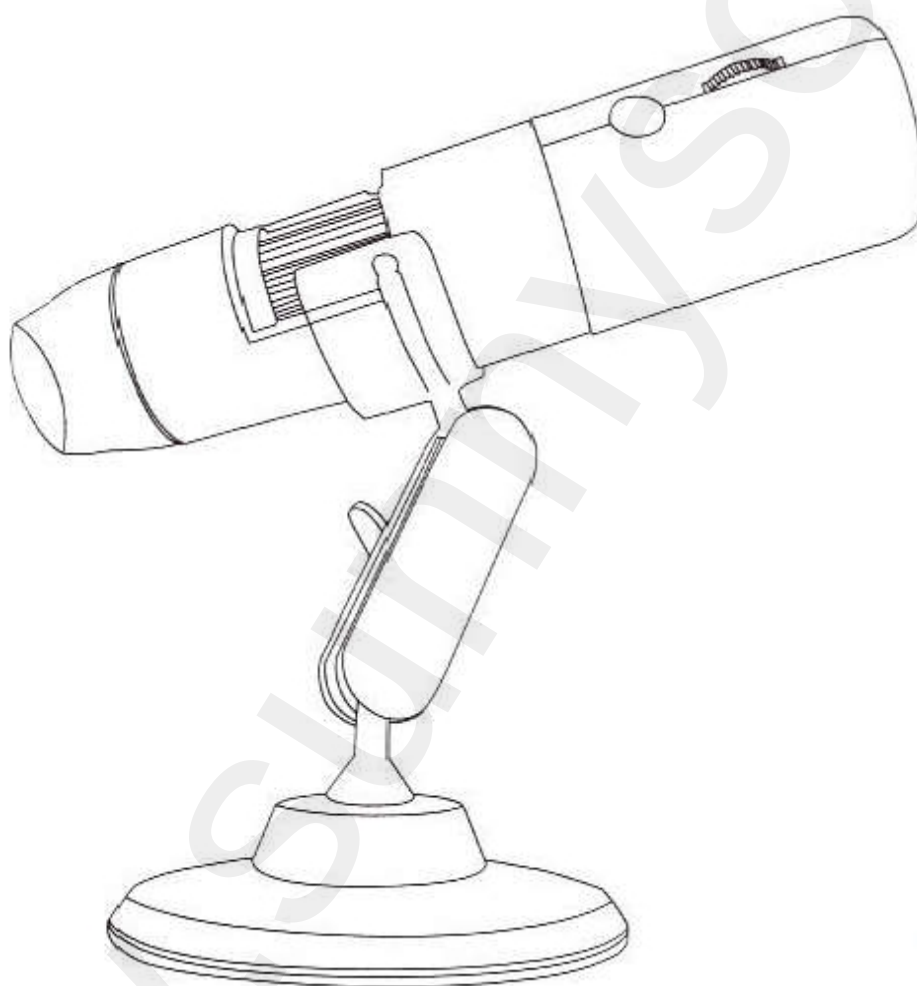

Felhasználói kézikönyv


Fontos megjegyzések

- (a) Először ellenőrizze, hogy a termék akkumulátora fel van-e töltve, majd használja a terméket.
- (b) Ha mikroszkopikus világokat, például sejteket vagy tényleges biológiai metszeteket kell megfigyelnie, a termék jól jön.
- (c) Használat előtt nyissa ki az objektív fedelét, használat után pedig zárja be.

Termékleírás

Ez egy hordozható Wi-Fi-s digitális mikroszkóp, amely Wi-Fi hotspottal van felszerelve, és képes csatlakozni iOS/Androidos telefonokhoz és táblagépekhez. Ugyanakkor a mikroszkóp támogatja a számítógépek csatlakoztatásához szükséges microUSB kábelt is. Minél nagyobb a képernyő, annál jobb a megjelenítési hatás és a képminőség tiszta. Támogatja a fényképek, videók készítését és a fájlok mentését.

A termék jellemzőinek leírása

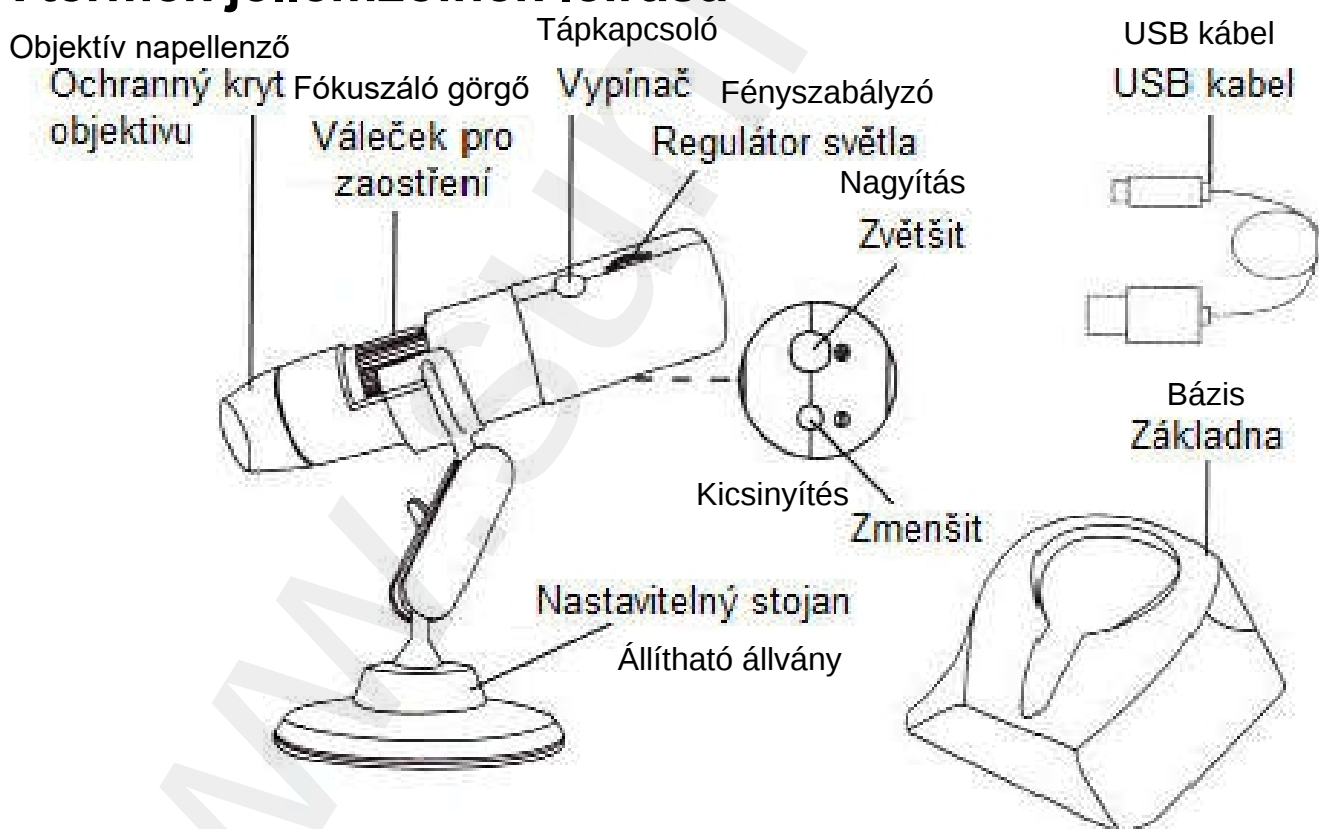

Használati utasítás (mobiltelefon-használók)

1. Töltse le és telepítse az alkalmazást

a) iOS

Keresse meg a **Max-see** alkalmazást az **App Store**-ban, töltse le és telepítse.

b) Android (nemzetközi):

Keresse meg a **Max-see** alkalmazást a **Google play**-ben, töltse le és telepítse.



c) Android (Kína):

Szkennelje be a QR-kódot, majd töltse le és telepítse az alkalmazást.



Android

2. A készülék bekapcsolása


Nyomja meg hosszan a hálózati kapcsolót, és látni fogja, hogy a készülék kijelzője kék színnel villog. Ha a Wi-Fi kapcsolat sikeres, a kék fény továbbra is világít.

3. Csatlakozás a Wi-Fihez

Indítsa el a **Max-see** alkalmazást, és kattintson a képernyőn az **OK** gombra, hogy az iOS/Android készülék Wi-Fi beállítások oldalára lépjen, és csatlakozzon a **Max-see_0000** Wi-Fi hotspothoz (jelszó nélkül). A sikeres csatlakoztatás után térjen vissza a **Max-see** alkalmazáshoz a használathoz.

4. Állítsa be a fókuszgörgőt és a LED-fényeket

Kép- vagy videofelvételi állapotban forgassa ezt a tárcsát a fókusz beállításához, a témára való fókuszáláshoz és a LED-fény fényerejének beállításához a legjobb megtekintési feltételekhez.

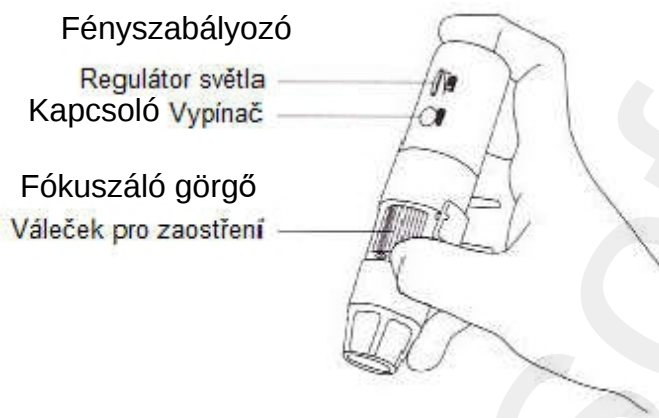

Az alkalmazás menü használata mobiltelefonokon



Fénykép: kattintson a fényképhez. **Felbontás.** **Forgatás 180°:**

Kattintson a gombra a téma 180°-os elforgatásához.

Videó: kattintson a videó felvételéhez / a videó felvételének leállításához.

Rögzített fájlok: kattintson a már rögzített fényképek vagy videók megtekintéséhez vagy törléséhez.

A menü használata egy Windows programban

1. A program letöltése


Töltse le a programot az alábbi linkről: www.inskam.com/download/camera.zip.

2. Kapcsolja be a mikroszkópot

Nyomja meg hosszan a készüléket a képek készítéséhez / a gép gombjának váltásához, látni fogja, hogy a készülék kijelzője kék színnel villog.

3. Csatlakoztassa a számítógépet


- Csatlakoztassa a mikroszkópot a számítógéphez az adatkábelek segítségével, és indítsa el a **Smart Camera** programot.
- Kattintson a program főmenüjének **Beállítások** ikonjára.
- Kattintson az **Eszköz** legördülő menüre, és válassza a **GENERAL-UVC** lehetőséget.

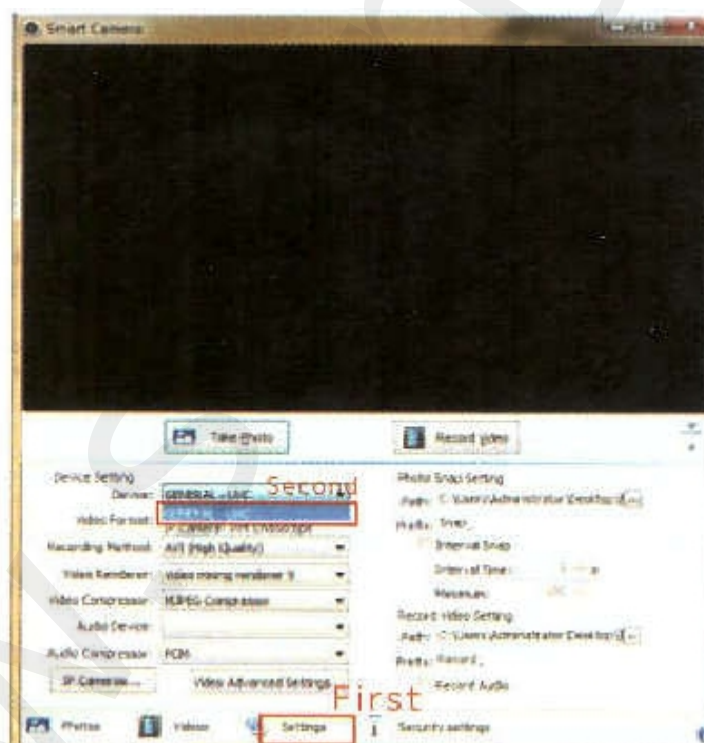

A menü használata egy Mac programban

- Kapcsolja be a mikroszkópot, és csatlakoztassa az adatkábellel a készülékhez.
- Indítsa el a **Photo Booth**-ot az **Apple App**-ban.

- 3) Kattintson a **Kamera** gombra, és válassza az **ÁLTALÁNOS - UVC #2** (alapértelmezett) lehetőséget.

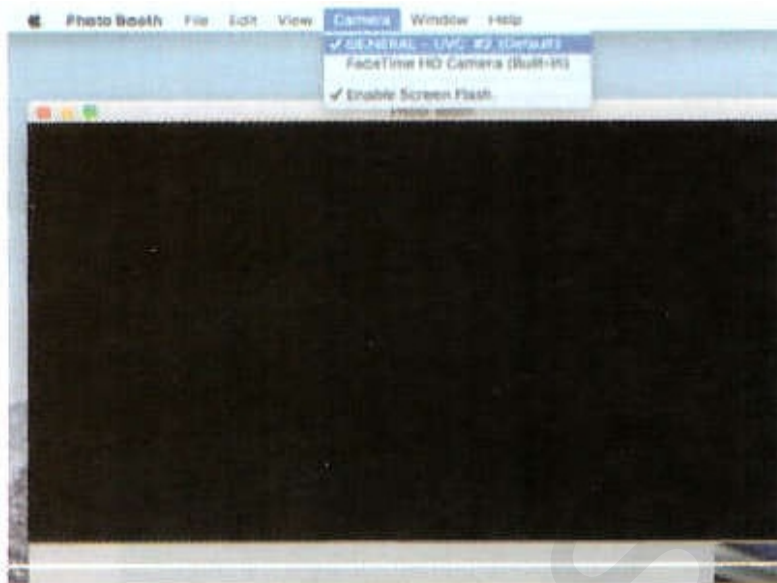

Megjegyzés:


Ha számítógépet használ, akkor:

- 1) Maximális felbontás 720P.
- 2) A fókuszgörgő nem használható a terméken, csak a fix fókusztávolság használható.

Tippek a töltéshez és a világításhoz

Díjszabási tanácsadás

- a) Ha a mikroszkóp teljesítménye alacsony, csatlakoztassa a töltőt a microUSB töltőcsatlakozóhoz. A mikroszkópot nem ajánlott használni a töltési folyamat alatt (az akkumulátor élettartama csökken).

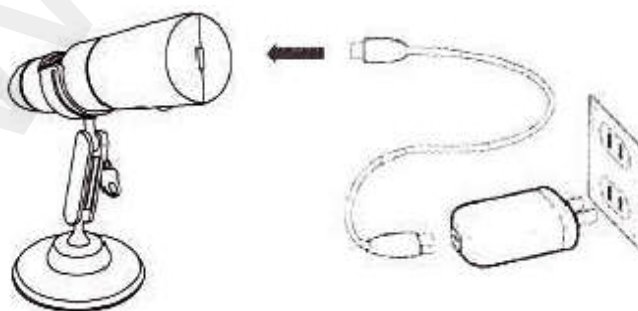

- b) Ne használjon számítógépet a mikroszkóp töltésére. Automatikusan PC-kamera üzemmódba kerül.

Az akkumulátorra vonatkozó információk

A termékhez igazított akkumulátor lítium-polimer akkumulátor, amelynek kapacitása 900 mAh. Teljesen feltöltve körülbelül 3 órán keresztül használható folyamatosan, és a töltési folyamat is körülbelül 3 órát vesz igénybe.

Fényjelző

- a) A kijelző töltés közben pirosan világít. Amikor a mikroszkóp teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik.
- b) A mikroszkóp indításakor a kék fény villog. A Wi-Fi hálózathoz való sikeres kapcsolódás után a fény kigyullad.
- c) Alacsony töltöttségi szint esetén a piros jelzőfény 10 másodpercig lassan villog, majd kialszik.

Műszaki paraméterek

Az érzékelő képpontjainak száma	2 millió
Nagyítás	50-1000 alkalommal
Képfelbontás	1920×1080p
Képalkotási távolság	Kézzel állítható 3-60 mm
W-Fi tartomány	10 m (nem blokkolt környezetben)
Képformátum	.jpg
Videó formátum	.avi / .mp4
USB interfész változatok	USB2.0
Töltés	microUSB (5 V $\overline{=}$)
Dinamikus képek	15 f/s 600 lux fényerő alatt
Támogatott operációs rendszerek	Android 4.3 és újabb iOS 8.0 és újabb Windows vista /7/8/10 MacOS X 10.8 és újabb

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi információkat a problémák elhárításához, vagy lépjen kapcsolatba velünk a megoldásokért.

Nincs kép

- 1) Ellenőrizze a telefon Wi-Fi beállításait, hogy a készülék sikeresen csatlakozott-e,
- 2) Kapcsolja ki és újra be az alkalmazást.
- 3) Kapcsolja ki és újra be a mikroszkópot.
- 4) Győződjön meg róla, hogy telefonja engedélyezi a **Max-see számára a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozást**.
- 5) Kapcsolja ki az adathálózatot.

A LED fények halványodnak

A fényerő növeléséhez állítsa a LED-világítást lefelé. **A**

készülék összeomlott

Indítsa újra a készüléket a bekapcsológomb és a fókuszgörgő 5 másodperces egyidejű megnyomásával.

A kamera automatikusan bezárul (iOS)

Menjen a **Beállítások** menüpontba, és keresse meg a **Max-see-t** az alkalmazások alján található részben a **fényképek** engedélyezéséhez.

Környezetvédelem

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.

Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prague 9, Csehország www.sunnysoft.cz